




바디스팟

오아 | OA-MA018

사용설명서

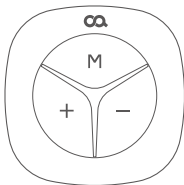


오아 제품을 구매해 주셔서 감사드립니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

제품 명칭

전면

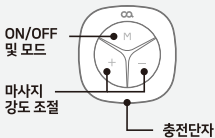


후면



사용 방법

※ 하루에 한 번 사용을 권장합니다.

01

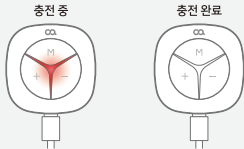


메인 기기가 완전히 충전이 되었는지 확인하십시오.

※ 충전 중 : 빨간색 LED / 충전 완료 : LED 꺼짐

사용 방법

02

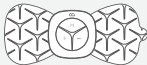

메인 기기를 발패드 / 바디패드 / 무릎패드(바디스팟 Knee) /
손목 스트랩(바디스팟 W)에 부착하여 사용하여 주십시오.

모드 설정 방법

01



LED 불빛이 켜질 때까지 "M"버튼을 길게 눌러주십시오.

※ 최초 작동 시 모드 1(그린)로 작동됩니다.

"M"버튼을 다시 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

02



"M"버튼을 짧게 눌러 원하시는 모드를 선택하여 주십시오. (6가지 모드)

※ 모드에 따라 각각 다른 LED 색상으로 표시됩니다.

03



"+", "-"버튼을 눌러, 강도 조절이 가능합니다. (15단계 강도)

모드 설정 방법

마사지기 모드

모드1 그린 : 회복모드



모드2 화이트 : 스트레칭모드



모드3 블루 : 활력모드



제품 명칭

모드4 레드 : 두드림모드



모드5 딥블루 : 마사지모드



모드6 옐로우 : 이완모드



주의 사항

1. 반드시 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오.
※ **사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.**
2. 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.
3. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
4. 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 의료기기가 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
※ **골다공증, 정맥류 및 관절염 등의 질환이 있으신 환자분은 반드시 담당 의사와 상의 후 사용하십시오.**
5. 담요나 베개 등으로 제품을 덮고 사용하지 마십시오. 화재, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.
6. 본 제품 첫 사용 전 완충 후 사용하시기 바랍니다.
7. 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
8. 건강 상태 또는 마사지할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.

주의 사항

9. 인공관절 등 신체에 이식된 의료기를 부착 중이신 분은 반드시 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
10. 제품을 절대 가슴(심장) 및 경동맥 위치, 입 주변에 사용하지 마십시오.
11. 수면 중에 마사지기를 사용하지 마십시오.
12. 염증, 감염, 타박상 등의 외상이 있는 부위에 마사지기를 사용하지 마십시오.
13. 벨트 버클이나 귀금속과 같은 물질에 제품이 닿지 않게 주의하여 주십시오.
14. 신체에 심장 박동기 또는 이식된 의료장비를 장착하고 있는 경우 사용하지 마십시오.
15. 손이 젖은 상태로 제품을 사용하지 마십시오.
16. 음주 후 사용하지 마십시오.
17. 어린아이의 사용을 금합니다.
18. 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호아래 사용하십시오.

주의 사항

19. 임신부의 경우 담당 의사와 반드시 상의 후 제품을 사용하십시오.
20. 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리 하십시오.
※ 라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등.
21. 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
22. 충전 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
23. 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
24. 제품을 무리하게 사용 시에는 부작용이 있을 수 있습니다.
연속 사용을 하지 마십시오.
25. 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.

제품 사양

- 상품명 : 오아 바디스팟
- 모델명 : OA-MA018
- 정격 입력 : DC 5V, 1.0A
- 소비 전력 : 2.5W
- 재질 : ABS
- 사용시간 : 8시간 (총 16회)
- 1회 사용시간(자동 종료) : 30분
- 크기 : 44.3 x 44.3 x 10.6 (mm)
- 무게 : 14g
- 구성품 : 메인 기기, USB 충전케이블(C-타입), 설명서



오아 주식회사

서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 : 1661-4555

www.oa-world.com